

Manuel d'Utilisation

Merci d'avoir choisi le « Eclarat LED Masque »



Veillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour une utilisation ultérieure.



Ce produit est uniquement destiné aux soins de la peau à usage particulier et ne peut pas être utilisé pour des traitements médicaux.



Produit : LED Masque Luminothérapie

Capacité de batterie : 2200mAh

Puissance : $\leq 15W$

Tension d'entrée/courant : 5V1A

Tension de fonctionnement : $\leq 3.5A$

Dimensions : 372 x 215 x 4,3 (mm)

Contenu du coffret



LED Masque



Coussinets oculaires en silicone



Télécommande/ Batterie



Sac de rangement



Sangles réglables



Cable de recharge DC

2

Avant de commencer




Il est conseillé d'effectuer un test de sensibilité à la lumière avant la première utilisation. *Pour plus de détails, veuillez consulter notre site: <https://eclarat.fr>*



Nettoyez l'appareil uniquement avec une lingette antibactérienne ou un chiffon propre imbibé d'eau.




Guide d'utilisation (1)

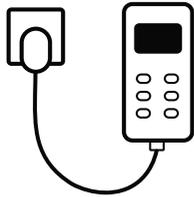


Chargez complètement la télécommande/ batterie avec le câble fourni pendant 4 heures avant la première utilisation.



Nettoyez soigneusement votre peau avant de commencer la séance. Évitez les soins contenant des émoullients qui peuvent empêcher la pénétration de la lumière.

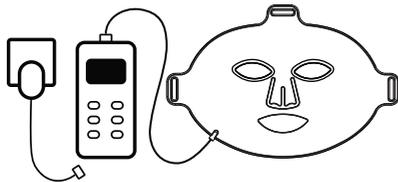


Débranchez impérativement la télécommande/ batterie et puis branchez le masque.

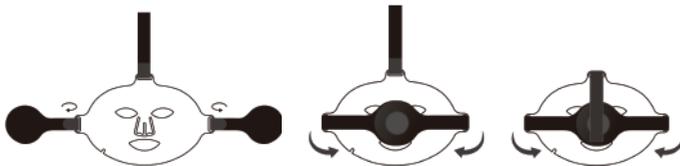

Appliquez le masque sur votre visage et attachez-le autour de votre tête avec les sangles réglables.

Guide d'utilisation (2)

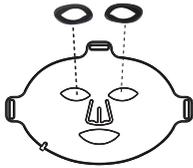

Positionnez les coussinets oculaires correctement avant chaque utilisation afin de protéger vos yeux. La partie la plus souple doit être positionnée contre le visage.



Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes pour allumer le masque sur la Télécommande. Une séance de 10min commence par défaut.



Prolongez ou réduisez de 5 minutes la durée du traitement en appuyant le bouton « T+ » ou « T- », cela vous permet de sélectionner une durée du traitement jusqu'à 30 minutes.



Appuyez sur le bouton « M » (Mode) pour sélectionner votre traitement préféré parmi les 7 modes de lumières.



Appuyez sur le bouton « NIR » pour allumer ou arrêter la lumière à infrarouge proche.



Appuyez sur le bouton « E » pour sélectionner l'intensité du traitement.

Les modes des lumières (1)



Lumière Rouge – Reconnue pour son effet anti-âge, efficace pour stimuler les fibroblastes et augmenter la production de collagène, essentiel au renouvellement des tissus. Elle va aussi tonifier et raffermir la peau, accélérer la cicatrisation et diminuer les rides.



Lumière Bleue – Efficace contre les comédons et les boutons, améliore la circulation sanguine, réduit les inflammations et les rougeurs. Utilisée pour purifier la peau, réguler le sébum et tuer les bactéries responsables de l'acné.



Lumière Jaune - Efficace pour traiter la couperose et les rougeurs dues à l'exposition au soleil. Elle stimule la circulation sanguine et lymphatique, calme les inflammations.



Lumière Verte- – Atténue les tâches pigmentaires, éclaircit les cicatrices et améliore l'uniformité du teint. Elle agit contre le mélanocyte, en inhibant la production de mélanine.

Les modes des lumières (2)



Lumière Violette – Efficace pour éliminer les bactéries causant l'acné tout en réduisant l'inflammation du visage et en atténuant les marques de cicatrices.



Lumière Cyan – Parfait pour traiter l'acné et l'hyperpigmentation et améliorer l'éclat de la peau.



Lumière Orange – Favoriser la production de collagène, améliorer l'action des fibroblastes et traiter les vergetures ainsi que l'alopécie.



La lumière à infrarouge proche – peut être réglée seule ou combinée avec l'une des autres lumières selon vos besoins.

(La lumière à infrarouge proche est invisible à l'œil nu, elle pénètre encore plus profondément dans la peau que la lumière rouge.)

Avertissements

1. N'utilisez pas l'équipement d'une manière autre que celles spécifiée dans les instructions, cela pourrait provoquer une panne de la machine ou des conséquences indésirables.
2. Les femmes enceintes, les mères allaitantes et les enfants ne peuvent pas utiliser le masque.
3. Il est déconseillé d'utiliser le masque en cas de maladies physiques/ sensorielles/mentales, ou durant un traitement en dermatologie.
4. Veuillez ne pas utiliser le masque si vous souffrez d'un trouble de photosensibilité, il est possible de développer des réactions cutanées graves.
5. Ne pas utiliser le masque lorsque vous utilisez des produits de soin de la peau susceptibles de provoquer une photosensibilité.
6. En cas de gêne /inconfort pendant l'utilisation du masque, cessez immédiatement son utilisation et consultez votre médecin.
7. Veuillez ne pas tremper ou rincer sous l'eau. Si vous l'avez fait, veuillez cesser de l'utiliser et contacter notre SAV.
8. En cas des pièces endommagées, veuillez cesser de l'utiliser et contacter notre SAV.
9. Ce masque est destiné aux particuliers pour une utilisation à domicile uniquement. Veuillez ne pas le démonter, le modifier ou le réparer vous-même.

Pour plus d'information, veuillez consulter notre site : <https://eclarat.fr>